

HARTMANN



Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl
9, route de Sélestat • CHÂTENOIS
67607 SELESTAT Cedex • FRANCE
Tél. : 03 88 82 43 43
Fax : 03 88 82 44 65
contact@hartmann.fr



RespoSorb® Super

Pansements superabsorbants stériles

Dimensions	Code EAN	Référence Laboratoire	Conditionnement	Code LPPR*
10 x 10 cm	4052199014586	685020	boîte de 10	1319063
10 x 20 cm	4052199014616	685021	boîte de 10	1301347
15 x 20 cm	4052199014647	685022	boîte de 10	1327370
20 x 25 cm	4052199014678	685023	boîte de 10	1347823
20 x 40 cm	4052199014708	685024	boîte de 10	1347823

Pour toutes informations techniques contactez notre infirmière conseil au :

N° Vert 0 800 17 37 57

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

e-mail : contact@hartmann.fr

et visitez également notre site : www.hartmann.fr

(1) Notice RespoSorb® Super (1213) 070562/0.

(2) Test "Comparatifs performances absorption" (20032014).

Les pansements **RespoSorb® Super** sont des dispositifs médicaux de classe : IIb. Fabricant : PAUL HARTMANN AG.
Organisme notifié : CE0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

* Ces dispositifs médicaux sont remboursés par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Date de création du document : mars 2014. Réf. 084 510/5

HARTMANN



RespoSorb® Super

La réponse optimale aux plaies fortement exsudatives



Polyacrylate



Cellulose

RespoSorb® Super

Absorption immédiate et verticale⁽¹⁾

Super-absorbant⁽¹⁾

Conformabilité

Protège contre la macération⁽¹⁾

Doux et souple

Polyacrylate super-absorbant

Nontissé

Rétention des exsudats⁽¹⁾

Fort en absorption⁽¹⁾

Indications

et

Mode d'action



INDICATIONS

► Plaies exsudatives à très exsudatives

- Plaies aiguës ou chroniques très exsudatives (ulcères, escarres)
- Lymphœdèmes
- Plaies tumorales
- Kystes (ex : kyste pilonidal)
- Abscesses
- Maladie de Verneuil
- Plaies présentant des signes locaux d'infection*

MODE D'ACTION

► Une protection optimale des plaies en cas d'exsudats abondants



- 1• Les exsudats sont absorbés et diffusés instantanément dans la couche superabsorbante, même lorsqu'un traitement compressif est associé^(*)



- 2• Les particules de polyacrylate superabsorbantes absorbent et retiennent les exsudats dans leur structure, empêchant ainsi la formation d'humidité excessive au contact de la plaie^(*)

➡ La plaie et la peau péri-lésionnelle sont protégées contre la macération

➡ Le processus de cicatrisation peut se poursuivre

* En association ou non avec un traitement local et/ou général adapté ; sous contrôle médical.

Composition du quadri-couches



Scannez le flashcode avec votre smartphone
pour voir la vidéo de l'expérience
réalisée avec RespoSorb® Super



RespoSorb® Super



COMPOSITION

► Une structure quadri-couche alliant performance et douceur



1• Voile en nontissé très doux au contact de la plaie

- Laisse pénétrer rapidement les exsudats[™]
- Favorise des retraits atraumatiques[™]

2• Couche de diffusion en cellulose


- Favorise la répartition homogène des exsudats dans la couche superabsorbante[™]

3• Couche superabsorbante

- Zone d'absorption et de rétention des exsudats par les particules superabsorbantes associées aux fibres de cellulose
- Très souple et conformable, grâce à une technologie de fabrication spéciale[™]

4• Couche en nontissé hydrophobe

- Protection contre les fuites d'exsudats[™]
- Permet les échanges gazeux[™]

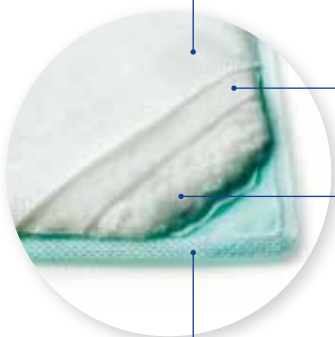

Avant absorption



Gélification


Avantages de RespoSorb® Super



AVANTAGES

► Des performances d'absorption/ rétention inégalées*

Capacité d'absorption et de rétention du pansement RespoSorb® Super versus autres pansements superabsorbants

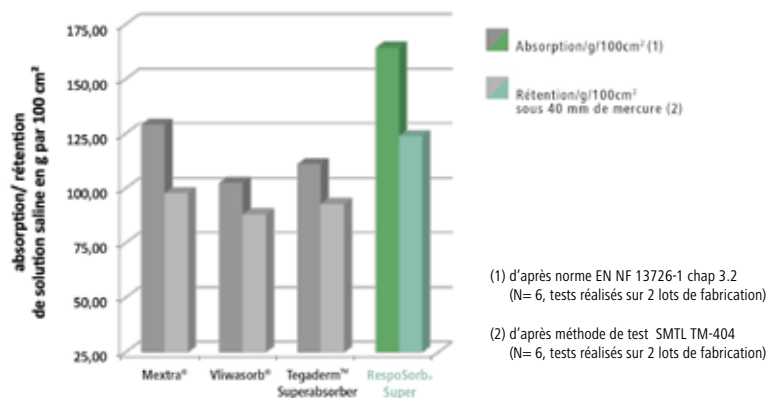

- RespoSorb® Super est l'un des pansements les plus absorbants de la catégorie des superabsorbants.
- RespoSorb® Super absorbe en moyenne environ 3 fois plus d'exsudats qu'un pansement absorbant classique^(*).

► RespoSorb® Super s'adapte à toutes les localisations

Grâce à sa structure souple, le pansement RespoSorb® Super épouse facilement les formes coniques ou arrondies.

► Confort des soins, économique

- Disponible en 5 tailles, le pansement RespoSorb® Super est adapté aux petites comme aux grandes plaies, ce qui facilite les soins et permet un pansement plus confortable pour le patient.
- Très absorbant, RespoSorb® Super permet d'espacer les renouvellements de pansements, améliorant ainsi le confort patient tout en limitant les risques de macération et de surinfection de la plaie.

* Par rapport aux pansements superabsorbants testés

** Test réalisé en interne

Conseils d'utilisation et Présentations



RespoSorb® Super

UTILISATION



- 1• Nettoyer la plaie
- 2• Choisir la taille du pansement **RespoSorb® Super** adaptée à la plaie
- 3• Appliquer le pansement et le fixer à l'aide d'une bande auto-adhérente type **Peha-haft®** ou d'une bande adhésive type **Omnifix®**.



► Renouvellement

🕒 Tous les 1 à 2 jours ou à saturation du pansement

FORMATS

► Une gamme complète pour s'adapter à toutes les plaies*



10 x 10 cm



10 x 20 cm



15 x 20 cm



20 x 25 cm



20 x 40 cm



* En cas de plaie profonde, utiliser un pansement primaire adapté aux cavités.