

HORIZON

SAC A DOS LEGER D'INTERVENTION



Poignée surmoulée
pour portage main

Sangle pour héli treuillage
résistance à la rupture 350 daN

Bandes rétro
construction micro
prismatique

Dos confort
mousse + maille 3D respirante


Bretelles et ceintures
réglable

Fond renforcé
Hypalon haute résistance
Pieds de fond PVC



STRUCTURE DU SAC

Le sac est entièrement doublé
d'une mousse dense et légère

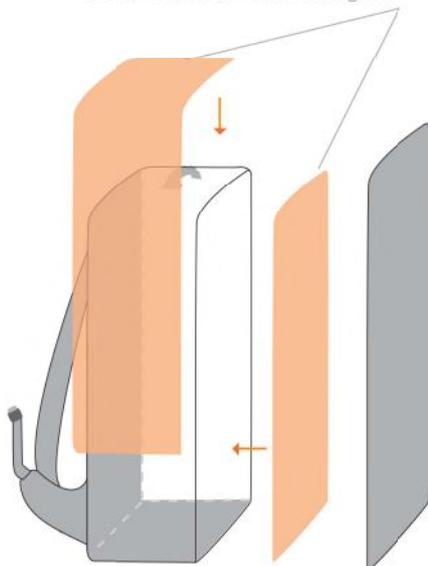

DIMENSIONS

H : 58 cm x l : 34 cm x P : 15 cm

VOLUME : 30l

POIDS à vide : 2 kg

ÉQUIPEMENT EXTERNE

- . 1 poche avant grand volume avec porte documents
- . Système d'accroche type MOLLE côté droit permettant d'accueillir une trousse amovible oxygénothérapie ou médicale
- . 2 poignées surmoulées en haut et à gauche du sac
- . Portage dos ergonomique avec ceinture ventrale de maintien
- . Sangle d'héli treuillage

UTILISATEURS



PORTAGE



COULEURS



sur devis :



HORIZON

SAC A DOS LEGER D'INTERVENTION

ÉQUIPEMENT INTERNE

Volet avant du sac :

- . 1 poche porte document cristal
- . 1 poche plaqué grand format (peut contenir collier cervical)

Intérieur sac

- . 3 poches filet de chaque côté du sac
- . Fond velcro pour recevoir des trousse amovibles

Équipement interne

- . 3 trousse longue
- . 2 trousse grand format



Ici version complète du sac (INCLUS)
. 5 trousse amovible

Peut recevoir également : 4 trousse MIRAGE

MATÉRIAUX

CORDURA 1100 deniers / DICKSON Lac 640 (sur demande) / HYPALON R Haute résistance, mécanique et chimique / **FERMETURES À GLISSIÈRE YKK** - haute Résistance / **VELCRO YKK / SANGLE** utilisé pour l'hélictreuillage - Résistance à la rupture 350 daN / Résistant à la déformation et l'allongement / **CRIS-TAL anti UV / BANDES RÉTRO RÉFLÉCHISSANTE** - Dimensions 50 mn et 25 mn - Normes ISO 20471 : 2013 / **MOUSSE** 10 mn

Les produits sont entièrement bordés avec de la sangle Sérégé polyester, surpiquage de l'ensemble des coutures pour une résistance accrue.

ENTRETIEN

Lavage : Utiliser un produit de moquette liquide ou en bombe en respectant les conseils du fabricant. Laisser sécher le produit dans une atmosphère sèche et aérée.

Attention : certains d'étergeant ainsi que les machines à laver peuvent abîmer l'enduit imperméable. Appliquer un imperméabilisant après chaque lavage

Boue, saleté : brosser à sec / **Goudron** : nettoyer à sec avec du white spirit / **Produits à base d'iode** : tâches indélébiles.



ORIGINE FRANCE GARANTIE
C'est l'unique label qui certifie l'origine française d'un produit. Il assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective. Les matières premières utilisées pour fabriquer les produits labélisés sont certifiées de fabrication française.



Notre garantie s'applique contre toute casse d'éléments du sac ou défaut de fabrication dans la mesure d'une utilisation normale.

Cette garantie couvre la bouclerie, les coutures, les poignées et les fermetures à glissières.

